


仪器比对报告生成器 v1.0

操作手册

软件简介

- 1. 软件用途：用于定量项目仪器比对结果的评估和报告生成；
- 2. 软件运行：使用浏览器（建议使用 Chrome 浏览器[下载地址](#)）访问 <http://10.10.20.1> 即可进入软件首页；
- 3. 程序流程图：

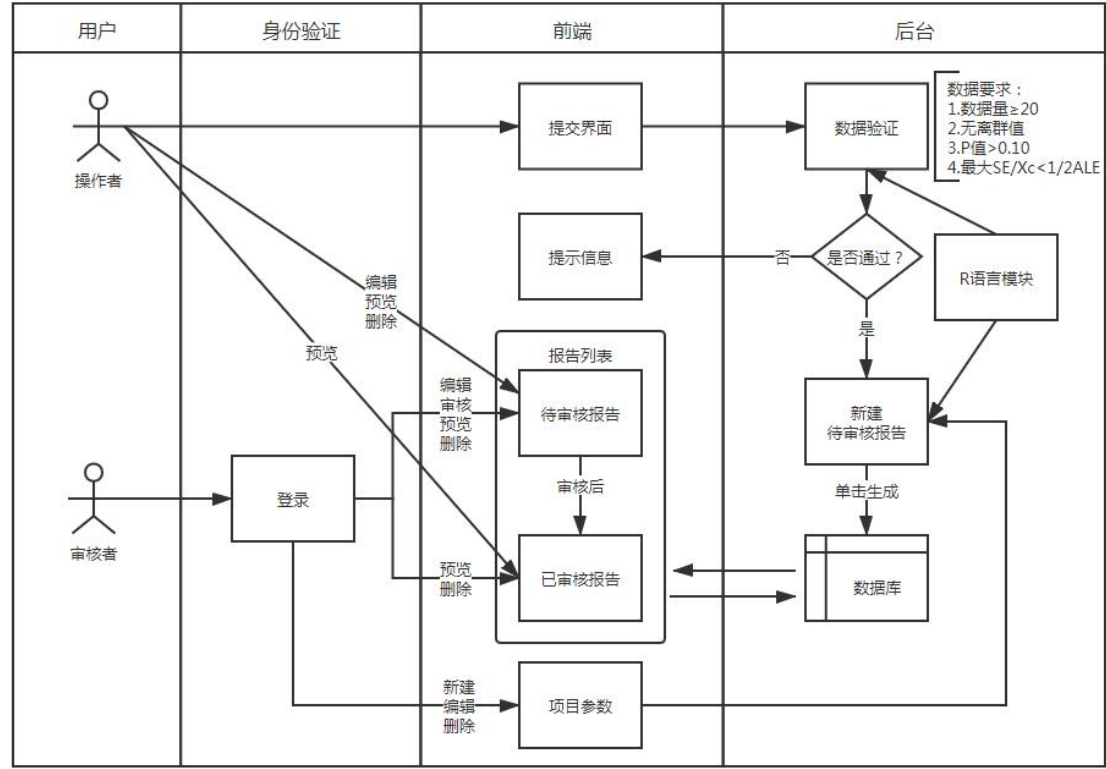

各页面说明

首页：

- 1. 标题栏：“定量项目仪器比对报告”页面和“项目参数设置”页面入口；
- 2. 主体：流程图和说明文字。

定量项目仪器比对报告页面：

1. 新建功能：单击后跳转至提交页面，用于上传数据生成报告；
2. 编辑功能：单击后跳转至编辑页面，可对待审核报告进行编辑；
3. 预览功能：单击后跳转至预览页面，可对报告进行预览和打印（使用浏览器自带的功能）；
4. 审核功能：单击后跳转至审核页面，可对待审核报告进行审核（需要管理员权限）；
5. 删除功能：单击后跳转至删除页面，删除待审核报告无需权限，删除已审核报告需要管理员权限；
6. 搜索功能：可按报告状态和比对项目搜索报告。

项目参数设置页面（参数设置需要管理员权限）：

1. 新建功能；
2. 编辑功能；
3. 删除功能。

提交页面（用于提交数据至后台进行报告生成）：

1. 比对项目：可选择一个已设置项目参数的项目；
2. 靶仪器编号：输入对应的仪器编号，用于生成报告中的靶仪器编号；
3. 比对仪器编号：输入对应的仪器编号，用于生成报告中的比对仪器编号；
4. 仪器数据：程序提供了数据上传模板文件，请下载后在模板中填写数据后上传；
5. 报告模板：目前只提供了一个定量仪器比对报告模板。

使用说明

1. 新增项目参数（如果已设置可跳过该步骤）：

登录管理员账号，在“项目参数设置”页面单击新增，进入新增页面，填写对应的项目参数，单击新建按钮。

图 1 项目参数设置页面



图 2 新建页面

报告生成器

定量项目仪器比对报告

项目参数设置

Hello Approver@admin.com!

Logout

新建

项目参数

项目名称

单位

LOQ

最大允许误差

医学决定水平一

医学决定水平二

结果有效数字位数

新建

返回

2. 提交数据：

进入“定量项目仪器比对报告”页面，单击新建，进入“数据提交”页面。该页面需要输入的信息包括比对项目名称，靶仪器/比对仪器编号，仪器数据文件（提供上传模板），报告模板（目前只有一个模板可选择）。输入对应的信息后单击提交按钮。

图 3 定量项目仪器比对报告页面



图 4 数据提交页面

3. 生成报告：

提交报告且数据验证通过后，进入“报告生成”页面。该页面可编辑的信息包括：比对项目名称、检测试剂/批号、检测时间范围，评估日期，检测人员，调查者，调查时间。填写对应的信息后单击生成按钮。

4. 审核报告：
进入“定量项目仪器比对报告”页面，可在报告列表中查看所有已生成的报告，选择一个待审核报告单击“审核”按钮审核报告（需登录为管理员权限）。

图 5 报告列表

报告列表

新建

所有

比对项目

搜索

状态	比对项目	靶仪器	比对仪器	调查者	调查日期	审核者	审核日期	
已审核	他克莫司	FXS-YZ03	FXS-YZ05	邹慧	2020/3/17	Approver	2020/4/8	预览 删除
待审核	全血钙	FXY-MS05	FXY-MS06	岑降妹	2019/9/21			编辑 审核 预览 删除
待审核	25-羟基维生素D	FXS-YZ18	FXS-YZ02	梁志辉	2020/3/22			编辑 审核 预览 删除

5. 打印报告：
进入报告预览页面，单击报告右下角的“导出”按钮，可将报告另存为 PDF。

图 6 报告导出

调查者(Investigator): 邹慧	日期(Date): 2020/3/17
学科主任(Section director): Approver	日期(Date): 2020/4/8

[编辑](#) | [返回](#)

导出